


Aloita tästä

Aloitussopas

Mittariisi yhteensopivan diabeteksenhallintasovelluksen voit hakea osoitteesta www.accu-chek.com.

ACCUCHEK®

Yleiskuva mittarista

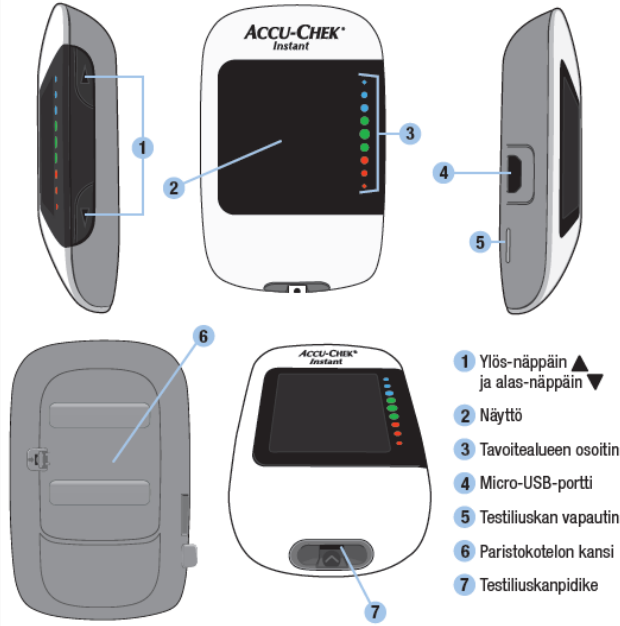

- 1 Ylös-näppäin ▲ ja alas-näppäin ▼
- 2 Näyttö
- 3 Tavoitealueen osoitin
- 4 Micro-USB-portti
- 5 Testiliuskan vapautin
- 6 Paristokotelon kansi
- 7 Testiliuskanpidike

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen




Kun käynnistät mittarin ensimmäistä kertaa, se kehottaa asettamaan kellonajan ja päivämäärän. **Set-up** ilmestyy näyttöön ja tuntikenttä vilkkuu. Suurena tai pienennä tuntiasetusta painamalla ▲ tai ▼.




Vahvista tuntivalinta ja siirry seuraavaan kenttään pitämällä ▲ painettuna. Voit säätää jokaista kenttää toistamalla kohtia 1 ja 2. Asetettuasi vuoden tallenna asetukset pitämällä ▼ painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva testiliuskasymboli.


Lansettikynän valmisteleminen

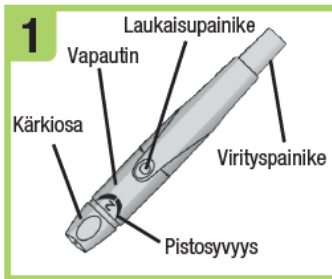


Tutustu Accu-Chek Softclix-lansettikynään.

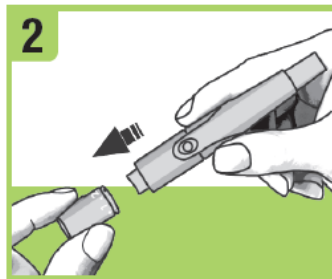


Irrota lansettikynän kärkiosa suoraan vetämällä. Älä kierrä kärkiosaa.

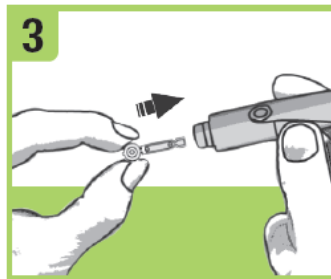

Aseta lansetti lansettikynään niin, että se lokahtaa paikalleen.

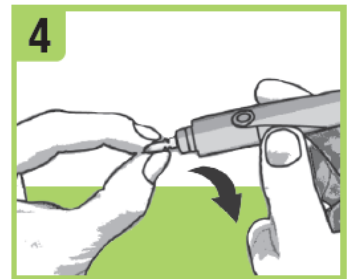


Kierrä lansetin suojakappale irti.

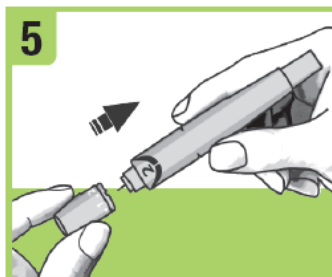

Aseta lansettikynän kärkiosa takaisin paikalleen. Varmista, että kärkiosan lovi osuu lansettikynän syvennyksessä olevaan keskikohtaan.



Säädä lansetin pistosvyvyys sopivaksi. Valitse aluksi 2. Valitse paksummalle iholle suurempi luku.

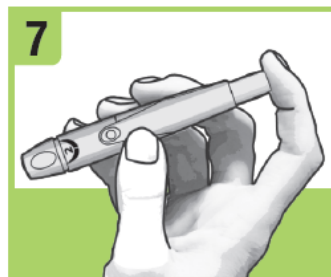


Paina virituspainike kuulakynän tavoin vasteeseen saakka. Painaessasi virituspainiketta älä paina laukaisupainiketta.




Laukaisupainike muuttuu keltaiseksi, kun lansettikynä on valmis. Aseta lansettikynä sivuun, kunnes olet valmis pistämään sormenpäähän.

Verensokerin mittaaminen

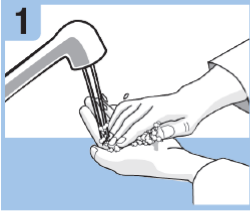


Pese ja kuivaa kätesi ennen verensokerin mittaamista.

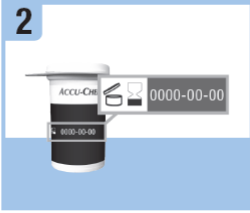


Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä testiliuskapurkin kyljestä. Älä käytä vanhentuneita testiliuskoja.




Ota testiliuska testiliuskapurkista. Sulje testiliuskapurkki tiiviisti.

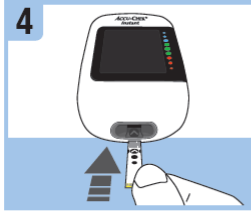


Aseta testiliuskan metallinvärinen pää mittariin.

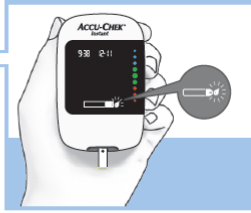


Mittari käynnistyy. Näyttöön ilmestyy vilkkuva pisarasymboli.

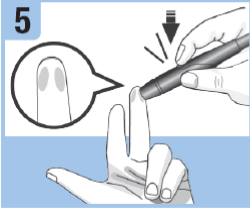


Paina lansettikynä napakasti sormenpään reuna-alueelle ja paina keltaista laukaisupainiketta, jolloin lansetti pistää ihoon.

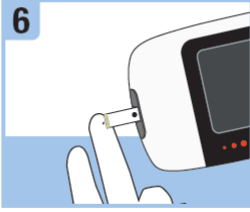


Kosketa veripisaraa testiliuskan keltaisella reunalla. Älä aseta verta testiliuskan päälle.

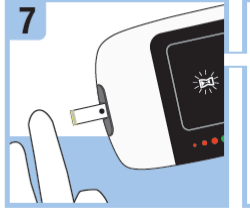

Poista sormi testiliuskalta, kun näyttöön ilmestyy vilkkuva tiimalasisymboli. Ellet poista sormea testiliuskalta, voit saada vääriä mittaustuloksia.

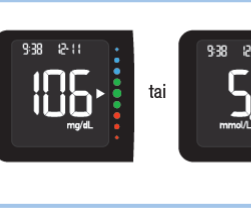

Mittaustulos ilmestyy näyttöön alle 4 sekunnissa.

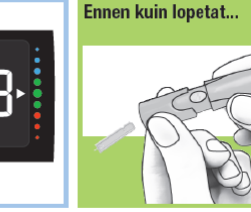

Ennen kuin lopetat...

Irrota lansettikynän kärkiosa. Suuntaa lansetti itsestäsi pois päin. Vapauta lansetti työntämällä vapautinta eteenpäin.

Virheilmoitukset

HUOMAUTUS

Koodillisen virheilmoituksen (E-1–E 14) tullessa näytössä näkyvät vuorotellen virhekoodi ja Err.

Aina jos näyttöön ilmestyy joku seuraavista virheilmoituksista, katso ohjeet käyttöohjeen luvun Mittarin huolto ja vianmääritys kohdasta Virheilmoitukset.

E-1 Testiliuska voi olla vahingoittunut, se ei ole kunnolla paikallaan tai se on käytetty. Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen paikalleen tai, jos se on vahingoittunut tai käytetty, vaihda se.

E-3 Kyseessä on mittari- tai testiliuskavirhe. Tämä virheilmoitus voi tulla, jos testiliuskapurkin korkki ei ollut tiiviisti kiinni. Testiliuskat ovat voineet vahingoittua väärän säilytyksen tai käsittelyn takia. **Älä koskaan tee hoitopäätöksiä virheilmoituksen perusteella.** Toista verensokerimittaus. Jos näyttöön ilmestyy toinen E-3-virheilmoitus, tee tarkistusmittaus käyttäen tarkistusliuosta ja uutta testiliuskaa. Lue käyttöohjeen luvun Tarkistusmittaukset kohta Tarkistusmittauksen tekeminen. Jos saat edelleen E-3-virheilmoituksen, käytä verensokerin mittaamiseen toista menetelmää, kuten varamittaria ja -testiliuskoja. Jos toinen menetelmä antaa erittäin korkean verensokerin mittaustuloksen tai toista menetelmää ei ole käytettävissä, **ota heti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.** Joissain harvoissa tapauksissa E-3-virheilmoitus voi tarkoittaa sitä, että verensokeriarvo on erittäin korkea ja suurempi kuin järjestelmän mittausalueen suurin arvo. **Lue käyttöohjeen luvun Verensokerimittaukset kohdasta Poikkeavat verensokerin mittaustulokset, mitä muita syitä virheilmoitukseen voi olla.**

E-4 Testiliuskaan ei ole imeytynyt riittävästi verta tai tarkistusliuosta, tai näytettä on lisätty mittauksen jo alettua. Hävitä testiliuska ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-6 Verta tai tarkistusliuosta on imeytetty testiliuskaan ennen kuin näyttöön on ilmestynyt vilkkuva pisarasymboli. Hävitä testiliuska ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-7 On tapahtunut sähköinen virhe. Irrota paristot, pidä jompaakumpaa mittarin näppäintä painettuna vähintään 2 sekuntia, ja aseta paristot takaisin paikalleen. Tee verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-8 Lämpötila on järjestelmälle sopivan alueen ylä- tai alapuolella. Tarkista testiliuskojen pakkausselosteesta järjestelmän toimintaolosuhteet. Siirrä mittari sellaiseen paikkaan, jossa olosuhteet ovat sopivat, ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus. Älä lämmitä äläkä jäähdytä mittaria keinotekoisesti.

E-9 Paristoista saattaa olla virta loppu. Käynnistä mittari uudelleen. **Jos olet kylmässä paikassa, siirry sellaiseen paikkaan, jossa lämpötila on sopivampi, ja tee uusi mittaus.** Jos ilmoitus tulee useista yrityksistä huolimatta aina uudestaan näyttöön, vaihda paristot. Jos ilmoitus ilmestyy uudestaan näyttöön paristojen vaihdon jälkeen, irrota paristot, pidä jompaakumpaa mittarin näppäintä painettuna vähintään 2 sekuntia, ja aseta paristot sitten takaisin paikalleen.

E 10 Kellonaika ja päivämäärä saattavat olla väärin. Näytössä näkyy vilkkuva langattoman yhteyden symboli, kun mittari yrittää synkronoida kellonajan ja päivämäärän siihen yhdistetyn laitteen kanssa. Kun langattoman yhteyden symbolia ei enää näy, sammuta mittari painamalla ylös-näppäintä. Paina ylös-näppäintä toisen kerran, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva testiliuskasymboli. Ellei kellonajan ja päivämäärän synkronointi onnistunut, mittari kehottaa asettamaan ne, kun käynnistät sen seuraavan kerran. Lue käyttöohjeen luvun Tietoa uudesta järjestelmästä kohta Kellonajan ja päivämäärän asettaminen.

E 11 Testiliuska voi olla vahingoittunut. Toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus käyttäen uutta testiliuskaa.

E 12 Verinäytteesi askorbaattipitoisuus voi olla suuri. Ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

E 13 Testiliuskanpidikkeessä voi olla nestettä tai epäpuhtauksia. Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen paikalleen, tai toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus käyttäen uutta testiliuskaa. Jos virhe toistuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

E 14 On tapahtunut sähköinen virhe. Ota yhteys asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Ota yhteys asiakaspalveluun, ellei virheilmoitus häviä.



VAARA



• Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Lisätietoa on käyttöohjeessa.

• Tämä aloitusopas ei korvaa Accu-Chek Instant -verensokerimittarin käyttöohjetta. Käyttöohje sisältää tärkeitä käsittelyohjeita ja lisätietoja.

• Lansettikynä on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Suomenkielinen käyttöohje: <https://www.accu-chek.fi/download/file/fid/18786>

VIIMEISIN PÄIVITYS: 2020-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



HUOMAUTUS

• Pidä varaparistoja aina saatavilla.

• Pariston käyttökään vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten lämpötila ja paristojen valmistaja.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT ja SOFTCLIX ovat Rochen tavaramerkkejä.

© 2020 Roche Diabetes Care
09291555001(01)-0720



Roche Diagnostics Oy,
Revontulenpuisto 2C
PL 69, 02101 Espoo, FINLAND