

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Fimlab Omamittauspalvelu: RocheDiabetes Care Platform (RDGP): Potilaan tietojen hätäkatselutoiminnallisuus

Päivitetty: 29.9.2022

- Omamittaussovelluksen ja RocheDiabetes Care Platformin (RDCCP) välille on toteutettu SSO-toiminnallisuus.
- SSO mahdollistaa siirtymisen Rochen palveluun katsomaan potilaan mittausdataa suoraan Omamittaussovelluksesta yhdellä klikkauksella ilman erillistä manuaalista kirjautumista.
- Hätkäkselutoiminnallisuus mahdollistaa toisen rekisterinpitäjän alaisuudessa annettujen laitteiden mittaus tietojen tarkastelun hätkäkselanteessa.

Siirtyminen potilaan tietoihin hätäkatselutoiminnallisuudella




- Siirry Potilaan laitteiden hallinta -sivulle ja klikkaa pilvi-ikonia.
- Jos potilaan pilvipalvelutili on rekisteröity toisen rekisterinpitäjän nimiin, avautuu ilmoitus hätäkatselutunnusten käytöstä.
- Valitaan hätäkatselutunnusten käytön syy ja painetaan Jatka-napista.
- Jos potilastunniste on syötetty Omamittaussovellukseen, RDCP-palvelu avautuu uuteen ikkunaan ja potilaan sivu tulee näkyviin.
- Jos potilastunniste puuttuu Omamittaussovelluksesta, Rochen RDCP:n etusivu avautuu, missä potilasta voidaan hakea nimellä.

Potilastunniste




Potilastunniste

Potilaalla ei ole potilastunnistetta valitussa pilvipalvelussa

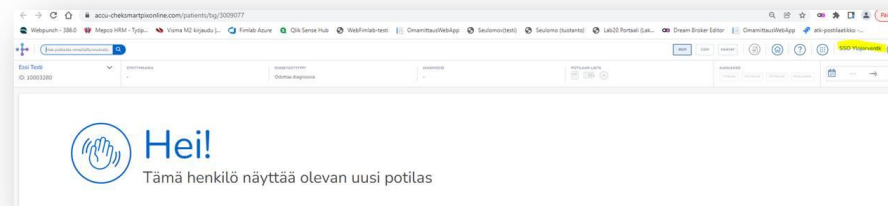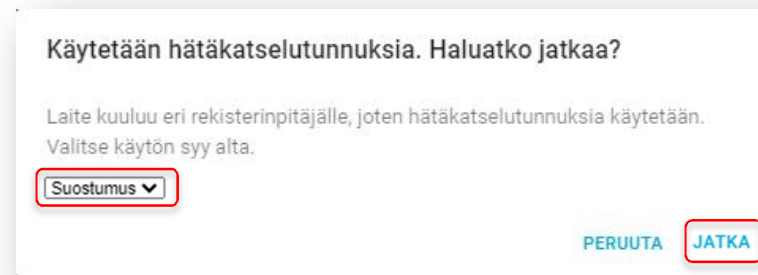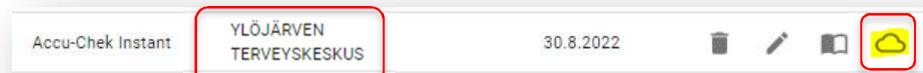

Tai

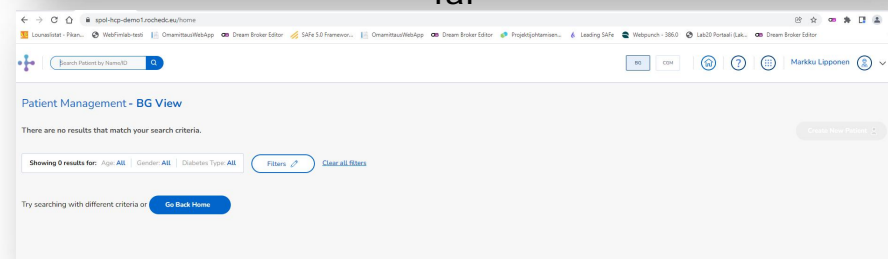

Fimlab

Tiedosta hyöty.

fimlab.fi

Seuraa meitä somessa @fimlab

in

f

